

## How does Papiopad® work against warts?

A wart is caused by a viral infection of the skin. Fever helps the body remove viral infections. By using the Papiopad® heat compresses, the skin is heated to just the right temperature to cause localized "fever".

The body then removes the virus so that the skin recovers in three months and the wart disappears.

Papiopad® heat compresses contain sodium ethanoate hydrate. Direct contact with skin is not dangerous; simply rinse the skin with water.

## Question and Answer

**Question: Why can it take several months before the wart is gone?**

**Answer:** The skin tissue of the wart is replaced by healthy skin in two to three months.

**Question: Are warts contagious?**

**Answer:** Yes. Warts are caused by a viral infection of the skin. The skin shed from the wart will carry the virus and therefore be infectious.

**Question: I have many warts. Do I have to treat every wart?**


**Answer:** You don't always have to treat every wart. Often if you treat the largest or most irritating warts, the rest of the warts will also disappear. Any remaining warts can be treated again with Papiopad.

**Question: If a Papiopad® heat compress begins to leak, is that dangerous?**

**Answer:** No. The Papiopad® heat compresses contain a non-toxic salt solution. Rinse the salt away with water. The broken Papiopad® heat compress can be disposed of as household waste.

Registered by:

Produvation BV, Delft, The Netherlands  
2014-Class I-NL-CA002-2014-31371  
European Directive 93/42/EEG

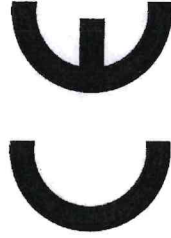

## Hoe werkt Papiopad® tegen wratten?

Een wrat wordt veroorzaakt door een virusinfectie van de huid. Koorts helpt het lichaam bij het verwijderen van virusinfecties. Door het gebruik van de Papiopad® hittecompressen wordt de huid precies goed verhit. Het geeft plaatselijke "koorts".

Het lichaam verwijderd dan het virus zodat de huid zich in drie maanden herstelt en de wrat verdwijnt.

Papiopad® hittecompressen bevatten natriumethanoaat hydrate. Er is geen gevaar bij directe aanraking van de huid. Spoel de huid met water.

## Vraag en antwoord

**Vraag: Waarom kan het enige maanden duren voordat de wrat weg is?**

**Antwoord:** Het huidweefsel van de wrat wordt in twee tot drie maanden vervangen door gezonde huid.

**Vraag: Zijn wratten besmettelijk?**

**Antwoord:** Ja. Wratten worden veroorzaakt door een virusinfectie van de huid. De wrat scheidt steeds virussen uit in de huid-schijfers die van de wrat komen.

**Vraag: Ik heb veel wratten. Moet ik elke wrat behandelen?**

**Antwoord:** U hoeft niet altijd elke wrat te behandelen. Als de grootste of hinderlijkste wratten behandeld worden dan verwijderen vaak alle wratten. Overgebleven wratten kunnen opnieuw behandeld worden met Papiopad.

**Vraag: Als een Papiopad® hittecompress lek raakt is dat dan gevaarlijk?**

**Antwoord:** Nee. De Papiopad® hittecompressen bevatten een niet giftige zout-oplossing. Spoel het zout met water weg. Het kapotte Papiopad® hittecompress kan met het restafval afgevoerd worden.



# Meditech Europe Papiopad® Foot

**heat compresses  
against warts**

**hittecompressen  
tegen wratten**

### Read this manual before use

Papiopad® Foot has been developed for the treatment of plantar warts. The use of both Papiopad® heat-compresses once every two days for a period of 3 weeks is recommended. The heat compresses are reusable up to 50 times.

### Lees vóór gebruik deze handleiding

Papiopad® Foot is ontwikkeld voor gebruik tegen voetwratten. Bij wratten is gebruik eens in de twee dagen van beide Papiopad® hittecompressen gedurende een periode van 3 weken aanbevolen. De hittecompressen zijn tot 50 keer herbruikbaar.

Also check our website:  
[www.meditech-europe.nl](http://www.meditech-europe.nl)

Kijk ook op onze website:  
[www.meditech-europe.nl](http://www.meditech-europe.nl)



### contents of your package

The Papiopad® Foot package consists of two Papiopad® heat compresses, two compression sleeves, a bandage and this manual. Papiopad® Foot has Class I medical certification according CE marking directives of the EEA.

### inhoud van uw aankoop

Het Papiopad® Foot pakket bestaat uit twee Papiopad® hittecompressen, twee compressiesleeves, een bandage en deze handleiding. Papiopad® Foot heeft een Klasse I medische certificering volgens de CE markering richtlijnen van de EU.



## Meditech Europe

Papiopad® is distributed by

Meditech Europe bv

Daalder 14

8305 BE Emmeloord

Nederland

[info@meditech-europe.nl](mailto:info@meditech-europe.nl)



## Use

Remove the cellophane around the compress.

A metal disc is visible in the clear liquid in the compress. By clicking the metal disc back and forth (feel a click), the liquid crystallizes and the heat compress immediately becomes hot.

If you cannot press the metal disc, try pressing it from the other side of the disc. If you have "clicked" the disc but the compress does not heat up, press more often until the compress becomes hot. When using a new compress for the first time, you will sometimes have to click a few times before it gets warm. If a compress is reused, a single click is almost always sufficient.

After activating, knead the compress briefly until the compress turns milky and smooth and then put the compress in the bandage.

Afterwards press the activated heat compress firmly on the area of the wart for 15 minutes.

After these 15 minutes, replace the heat compress immediately with the second activated compress.

After another 15 minutes the treatment is ready for that day. In total you heat the infected spot 30 minutes at a time. For warts, use of both Papiopad® heat compresses once every two days for a minimum period of 3 weeks is recommended.



## Gebruik

Verwijder het cellofaan rond het compress.

In het compress is een metalen schijfje in de heldere vloeistof zichtbaar. Door het metalen schijfje in de hittecompress heen en weer te klikken (voel een klik), kristalliseert de vloeistof en de hittecompress wordt direct heet.

Als u het metalen schijfje niet kunt indrukken, druk dan op de andere kant van het schijfje. Als u het schijfje ingedrukt hebt maar de compress wordt niet warm, druk dan vaker net zolang tot de compress heet wordt. Bij het eerste gebruik van een nieuw compress moet men soms enkele malen klikken voor dat hij warm wordt. Als een compress wordt hergebruikt dan is één keer klikken bijna altijd voldoende. Kneed, na het activeren, het compress even zodat het geheel melkachtig en soepel is en steek het in de bandage. Druk dan het geactiveerde hittecompress 15 minuten stevig op de plek van de wrat.

Vervang na deze 15 minuten het hittecompress meteen door de tweede geactiveerde compress. Na weer 15 minuten is de behandeling voor die dag klaar.

In totaal verhit u de plek dus 30 minuten per keer. Bij wratten is gebruik eens in de twee dagen van beide Papiopad® hittecompressen gedurende een periode van minimaal 3 weken aanbevolen.

## Attention!

The use of the Papiopad® heat compresses on the skin should not be painful. If heating is painful, slide the supplied compression-sleeves over the Papiopad® heat compress. This will lower the temperature of the compress on the skin. If the pain persists, do not continue. **Users with poor circulation and disrupted pain sensation, such as people with diabetes and neuropathy, are advised to use Papiopad® only in consultation with their physician.**

## Reusing Papiopad®

After cooling, the used heat compresses are hardened. You can ready them for reuse by boiling the compresses in water.

Proceed as follows:

- 1- Put the hardened compresses in a pan with enough water to submerge the compresses.
- 2- Bring the water to a boil and continue to boil for 5 minutes until all crystals inside the compresses have dissolved. The compresses need to be completely clear again.
- 3- Allow the compresses to cool to room temperature. The compresses are then ready for reuse. Keep the compresses in a clean place.

## Let op!

Het gebruik van de Papiopad® hittecompressen op de huid mag niet pijnlijk zijn. Als het verwarmen pijnlijk is, schuif het bijgeleverde compresshoesje om het Papiopad® hittecompress. De temperatuur op de huid wordt dan lager. Ga niet door als de pijn blijft aanhouden.

**Gebruikers met een verstoorde pijn ervaring, zoals mensen met diabetes en neuropathie, wordt aangeraden Papiopad® alleen te gebruiken in overleg met hun behandelend arts.**

## Papiopad® hergebruiken

Na het afkoelen zijn de gebruikte hittecompressen hard. U maakt ze weer gebruiksklaar door ze te koken.

Go als volgt te werk:

- 1- Doe de harde compressen in een pan met voldoende water zodat de compressen net onder water staan.
- 2- Breng het water aan de kook en laat het 5 minuten door koken tot alle kristallen in de compressen zijn opgelost. De compressen zijn weer helemaal helder.
- 3- Laat de compressen aan de lucht koelen tot kamertemperatuur. De compressen zijn klaar om opnieuw te gebruiken. Bewaar de compressen op een schone plek.

